





ADAPTER KIT FOR USE WITH PHILIPS DREAMSTATION 2

ADAPTER KIT INCLUDES:

1 - SoClean Express Adapter

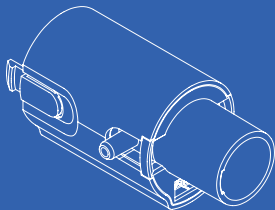

2 - Hose Sleeves
[For use with 12 mm hose]

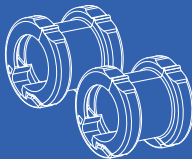

INSTRUCTIONS

PNA1410-DS2-23-CA

Philips Dreamstation 2 Adapter Installation Instructions

**If you need help connecting
your adapter, contact SoClean.**

For SoClean operation information,
please see the User Manual
provided with the device.

An electronic version of the User
Manual is available at [SoClean.com](https://www.soclean.com)
or you may contact Customer Care.

US: 1-866-501-3705 | CA: 1-800-916-4577
[SoClean.com](https://www.soclean.com) | info@soclean.com

SoClean Express Adapter
[Connects to the Hose Port]



SoClean, is an independent company not affiliated with Philips Respironics. Names and associated trademarks are solely owned by the respective companies and manufacturers. Depictions of brand logos on our website are for informational and educational purposes only and are used for customer sleep equipment recognition. We are not affiliated or endorsed by any sleep equipment manufacturer.


If you are a **SoClean 3** user, move on to **Step 1**.




If you are a **SoClean 2** user:

Detach **Ozone Tube** from **Injection Fitting** or your previous **SoClean Adapter**. Save **Injection Fitting** in case you need it in the future.


Move on to Step 1.

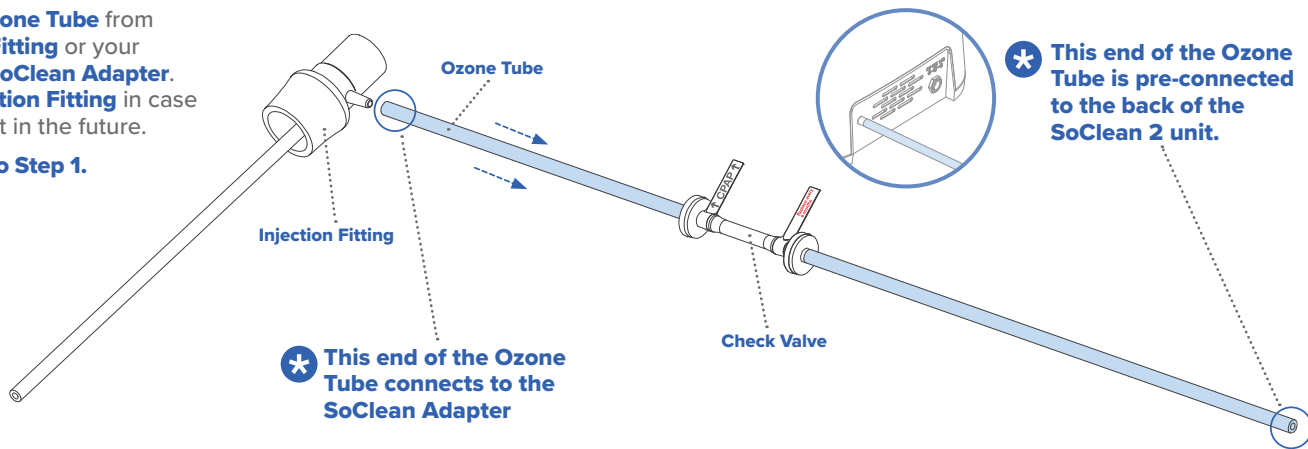

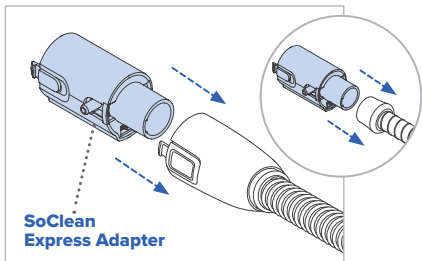


1

Connect the **SoClean Express Adapter** to the heated or non-heated hose.

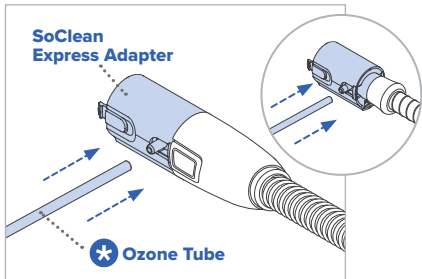

2

Connect the **Ozone Tube** to the **SoClean Express Adapter**.

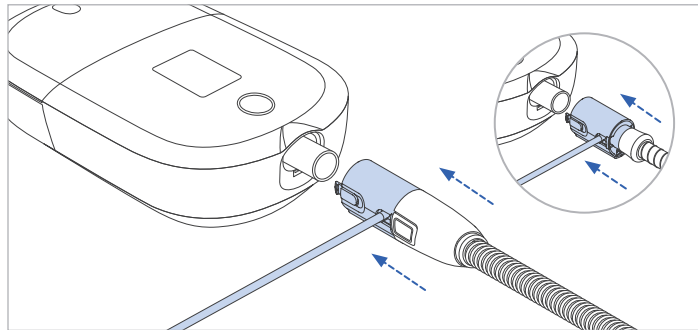

3

Connect the **SoClean Express Adapter** with hose and **Ozone Tube** to the DreamStation 2.





WARNING: The **Ozone Tube** should always be connected to the **SoClean Adapter** and the back of the SoClean unit when operating the SoClean.



WARNING: Ensure sleep equipment hose and **SoClean Adapter** are connected to the sleep equipment machine prior to operating a SoClean Cycle.

You are now ready to use the SoClean.

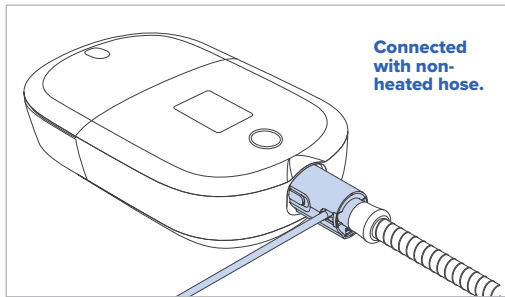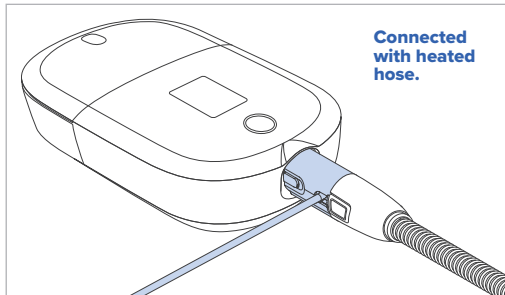

NOTE: The SoClean Adapter can be left connected to your sleep equipment machine after initial setup. You do not need to disconnect the SoClean Adapter to operate either the sleep equipment machine or the SoClean 3.

Adding distilled water to your humidifier reservoir:

When you need to add water to your reservoir, remove the reservoir from the sleep equipment machine. Add distilled water, and reinsert into the sleep equipment machine.

NOTE: SoClean is not responsible for damage to your sleep equipment machine or personal property resulting from equipment mishandling.

IMPORTANT: For travel, remove the SoClean Express Adapter from your sleep equipment and reconnect your Hose to your sleep equipment. If you only disconnect the Ozone Tube from your Express Adapter, the water in your humidifier will be pushed out through the Adapter Ozone Port during sleep equipment use and an overflow will result.

SoClean Hose Sleeve Installation Instructions

SoClean Hose Sleeve
[For use with 12 mm hose]




When to use the Hose Sleeve:

**The Hose Sleeve is required if you use a 12 mm hose.
It is not compatible with 15 mm or larger diameter hoses.**


An extra sleeve is included in the event of sleeve breakage.
You will only use one Hose Sleeve at a time.

The SoClean requires a snug fit around the hose when placed into the Hose Slot and the lid is closed. If there is space around the hose and this is not achieved, the SoClean will not operate.

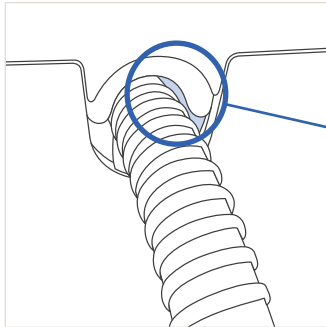

If there is visible space around the hose when placed in the Hose Slot, you may be using a 12 mm hose and require the Hose Sleeve be installed.



Determining your hose size:

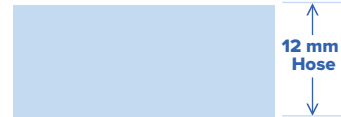

If you determine that you have a 15 mm hose and the SoClean is still not operating, contact Customer Care.


How to use the Hose Sleeve:

- 1** Position the Hose Sleeve 2 to 3 inches from the connector.

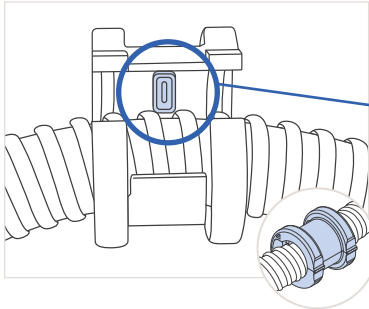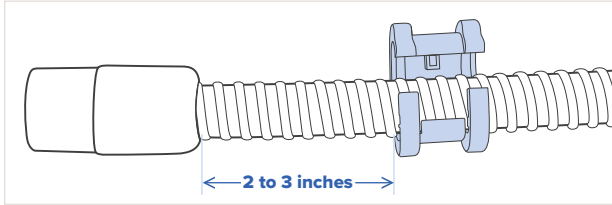


- 2** Position the hose on the Nub side of the Hose Sleeve. Slide the hose until the Sleeve "clicks" into place between two of the hose ribs and close the Sleeve.


- 3** Line up the Hose Sleeve with the gasket, place it in the Hose Slot and shut the lid.

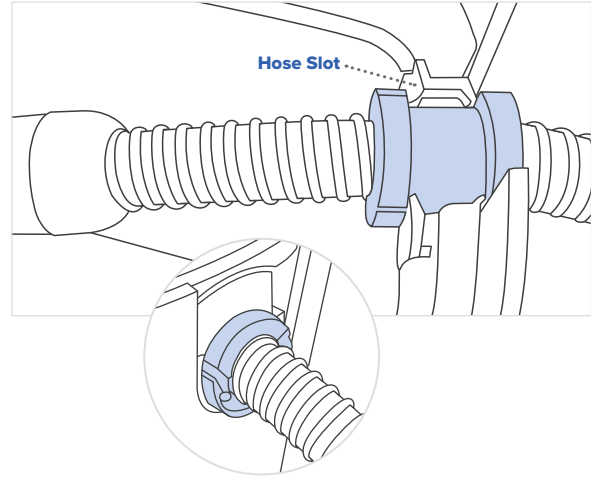


ADAPTER DISCONNECTION:

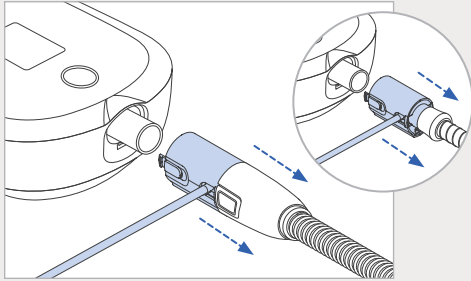


1
Disconnect the **SoClean Express Adapter** with hose and **Ozone Tube** from the DreamStation 2.

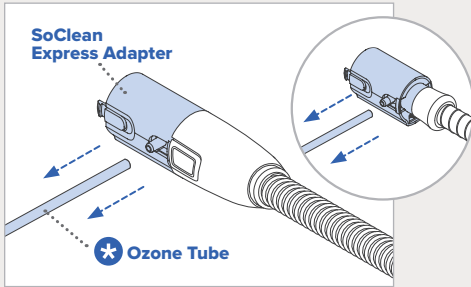

2
Disconnect the **Ozone Tube** from the **SoClean Express Adapter**.

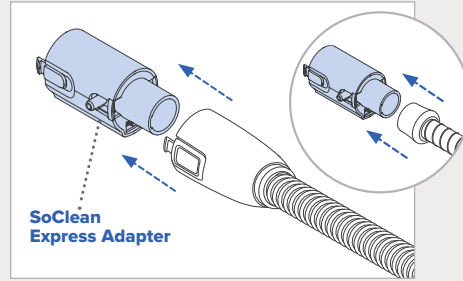

3
Disconnect the **SoClean Express Adapter** from the heated or non-heated hose.

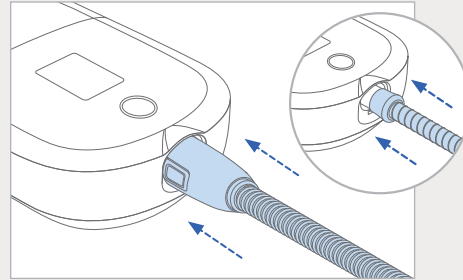

4
Connect heated or non-heated hose to DreamStation 2.
You are now ready to use your sleep equipment.

Using Your SoClean

The below diagram shows a SoClean 3 connected.
The SoClean 2 setup will look similar but include the check valve.

SoClean 3 connected to Philips DreamStation 2



Once you have completed the setup steps, you are ready to begin the daily maintenance of your sleep equipment accessories with your SoClean.

Safety Checklist Before Using Your SoClean

- Sleep equipment accessories are washed in sink before first use
- SoClean Adapter is installed on sleep equipment machine
- Ozone tube is connected to sleep equipment machine
- Sleep equipment hose is still connected to sleep equipment machine and mask
- SoClean is powered on
- Filter is installed



FRANÇAIS



SoClean®

TROUSSE D'ADAPTATEUR POUR UTILISATION
AVEC PHILIPS DREAMSTATION 2

LA TROUSSE D'ADAPTATEUR COMPREND :

1 – Adaptateur
SoClean Express

2 – Manchons de tuyau
[À utiliser avec un tuyau de 12 mm]

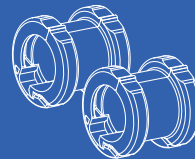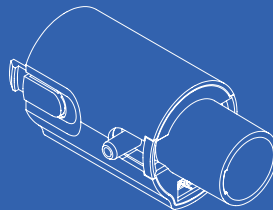

INSTRUCTIONS

PNA1410-DS2-23-CA

**Si vous avez besoin d'aide pour
brancher votre adaptateur,
veuillez contacter SoClean.**

Pour obtenir des renseignements
sur le fonctionnement de SoClean,
veuillez consulter le guide
d'utilisation fourni avec l'appareil.

Vous pouvez aussi consulter une
version électronique du guide
d'utilisation sur SoClean.com ou
contacter le service à la clientèle.

US: 1-866-501-3705 | CA: 1-800-916-4577
SoClean.com | info@soclean.com

Philips Dreamstation 2 Instructions d'installation de l'adaptateur

Adaptateur SoClean Express

[Se branche à l'orifice du tuyau]



SoClean est une entreprise indépendante non affiliée à Philips Respironics. Les noms et marques de commerce associées sont la propriété exclusive des entreprises et des fabricants respectifs. Les reproductions des logos de marque sur notre site Web sont fournies à titre d'information et de sensibilisation uniquement et sont utilisées pour la reconnaissance des équipements de sommeil par les clients. Nous ne sommes ni affiliés ni avalisés par aucun fabricant d'équipement de sommeil.


Si vous utilisez le **SoClean 3**, passez à l'étape 1.




Si vous utilisez le **SoClean 2** :

Détachez le **tube d'ozone** du **raccordement d'injection** ou de l'**adaptateur SoClean** précédent. Conservez le **raccordement d'injection** au cas où vous en auriez besoin plus tard.


Passez à l'étape 1.

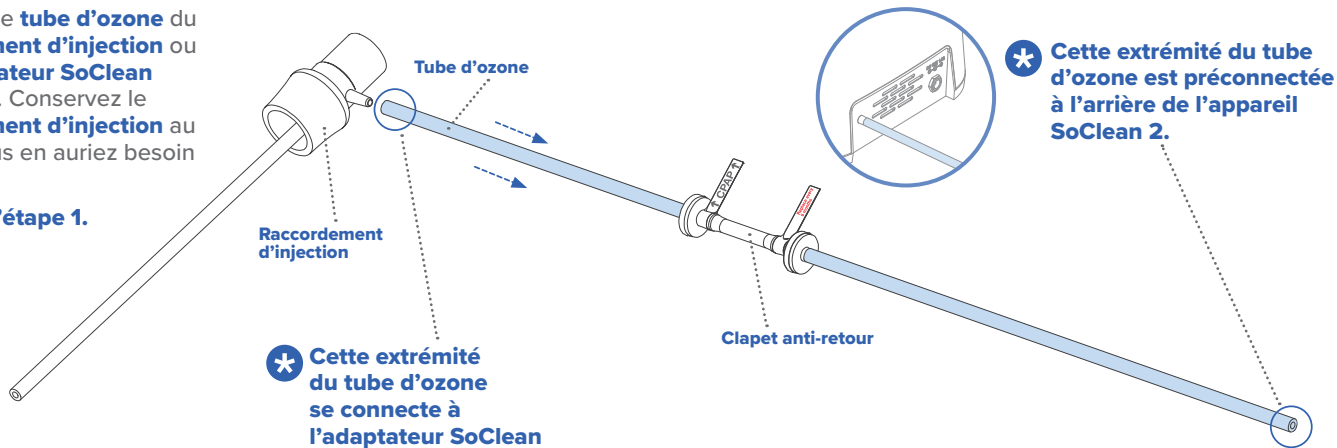

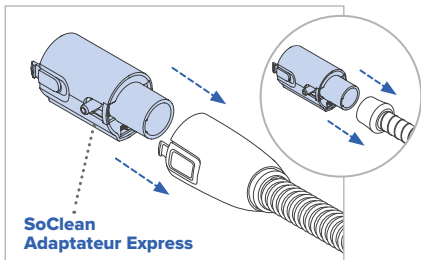

1

Branchez l'**adaptateur SoClean Express** au tuyau chauffé ou non chauffé.

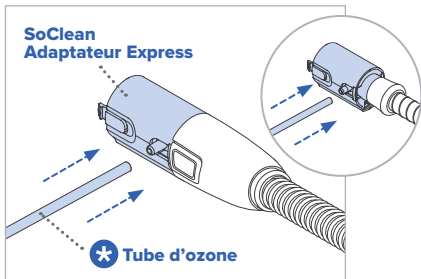


2

Branchez le **tube d'ozone** à l'**adaptateur SoClean Express**.



AVERTISSEMENT : le **tube d'ozone** doit toujours être connecté à l'**adaptateur SoClean** et à l'arrière de l'appareil SoClean lors de son utilisation.

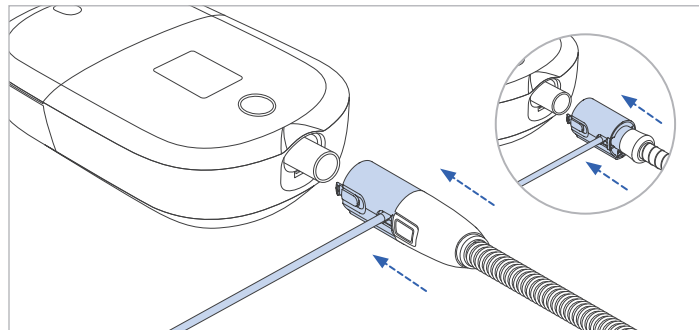



3

Branchez l'**adaptateur SoClean Express** au tuyau et le **tube d'ozone** au DreamStation 2.



AVERTISSEMENT : Assurez-vous que le tuyau de l'appareil de sommeil et l'**adaptateur SoClean** sont connectés à l'appareil de sommeil avant d'effectuer un cycle SoClean.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser le SoClean.

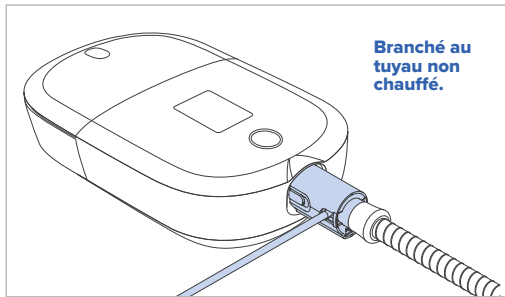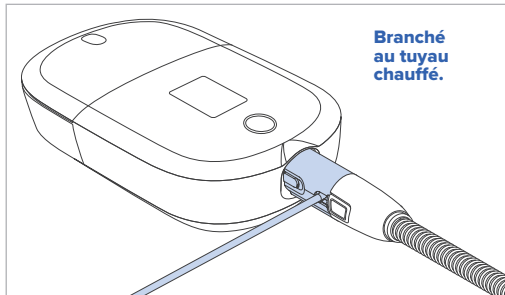

REMARQUE : Vous pouvez laisser l'adaptateur SoClean connecté à votre appareil de sommeil après la configuration initiale. Il n'est pas nécessaire de débrancher l'adaptateur SoClean pour faire fonctionner l'appareil de sommeil ou le SoClean 3.

Ajouter de l'eau distillée dans le réservoir de l'humidificateur : lorsque vous avez besoin d'ajouter de l'eau dans le réservoir, retirez-le de l'appareil de sommeil. Ajoutez de l'eau distillée et réinsérez-le dans l'appareil de sommeil.

REMARQUE : SoClean n'est pas responsable des dommages qui peuvent survenir à votre appareil de sommeil ou à vos biens personnels résultant d'une mauvaise manipulation de l'équipement.

IMPORTANT : pour les voyages, retirez l'adaptateur SoClean Express de votre appareil de sommeil et rebranchez le tuyau à la place. Si vous débranchez uniquement le tube d'ozone de votre adaptateur Express, l'eau de votre humidificateur sera expulsée par le port d'ozone de l'adaptateur pendant l'utilisation de l'appareil de sommeil et causera un débordement.

Manchon de tuyau SoClean Instructions d'installation

Manchon de tuyau SoClean
[À utiliser avec un tuyau de 12 mm]




Quand utiliser le manchon de tuyau :

Le manchon de tuyau est requis si vous utilisez un tuyau de 12 mm. Il n'est pas compatible avec les tuyaux de diamètre de 15 mm ou plus.


Un manchon supplémentaire est inclus au cas où le premier se brise. Utilisez un seul manchon de tuyau à la fois.

SoClean nécessite un ajustement serré autour du tuyau lorsqu'il est placé dans l'emplacement du tuyau et que le couvercle est fermé. S'il y a de l'espace autour du tuyau, SoClean ne fonctionnera pas.

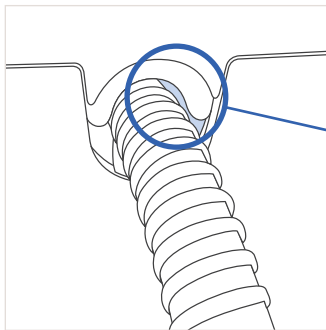

Si vous remarquez un espace autour du tuyau lorsqu'il est placé dans l'emplacement du tuyau, il se peut que vous soyez en train d'utiliser un tuyau de 12 mm et que vous ayez alors besoin d'y installer le manchon.



Déterminer la taille de votre tuyau :

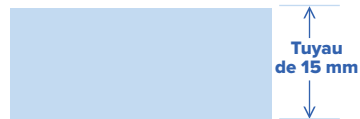

Si vous déterminez que vous avez un tuyau de 15 mm et que le SoClean ne fonctionne toujours pas, communiquez avec le service à la clientèle pour obtenir de l'aide.


Comment utiliser le manchon de tuyau :

- 1** Placez le manchon de tuyau à 2 ou 3 pouces du connecteur.

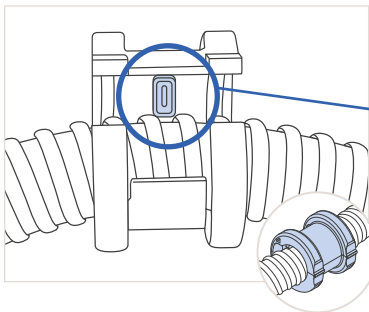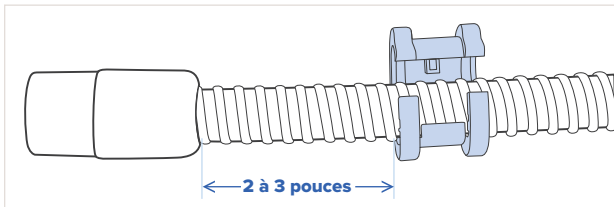


- 2** Placez le tuyau au centre du manchon de tuyau. Faites glisser le tuyau jusqu'à ce que le manchon émette un clic et se positionne entre deux nervures du tuyau puis fermez le manchon.


- 3** Alignez le manchon du tuyau avec le joint, placez-le dans l'emplacement du tuyau et fermez le couvercle.

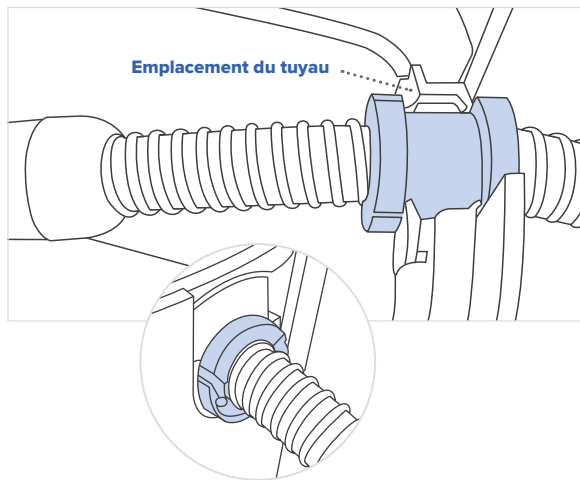


DÉCONNECTER L'ADAPTATEUR :

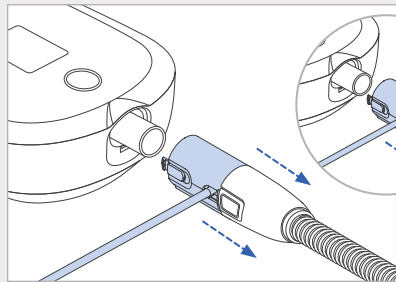


1
Débranchez l'**adaptateur SoClean Express** du tuyau et le **tube d'ozone** du DreamStation 2.

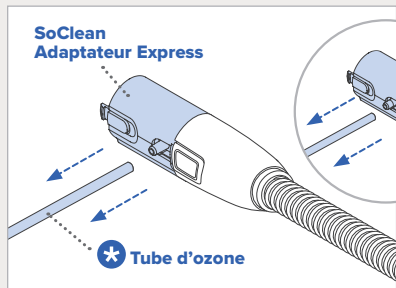

2
Débranchez le **tube d'ozone** de l'**adaptateur SoClean Express**.

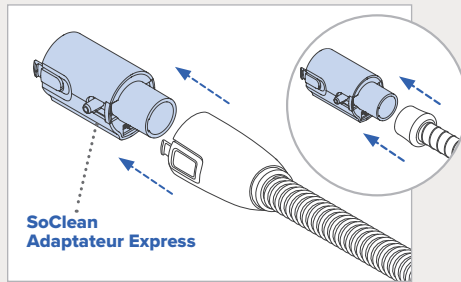

3
Débranchez l'**adaptateur SoClean Express** du tuyau chauffé ou non chauffé.

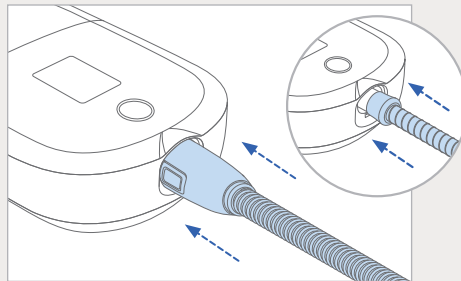

4
Branchez le tuyau chauffé ou non chauffé au DreamStation 2.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre appareil de sommeil.

Utilisation de l'appareil SoClean

Le diagramme ci-dessous montre un appareil SoClean 3 branché.
La configuration de SoClean 2 ressemble à celui-ci, mais comprend le clapet anti-retour.

SoClean 3 connecté au Philips DreamStation 2



Une fois que vous avez terminé les étapes de configuration, vous êtes prêt à commencer l'entretien quotidien de vos accessoires d'appareil de sommeil et de votre SoClean.

Liste de vérification de sécurité avant d'utiliser l'appareil SoClean

- Les accessoires de l'appareil de sommeil ont été lavés dans l'évier avant la première utilisation
- L'adaptateur SoClean est installé sur l'appareil de sommeil
- Le tube d'ozone est relié à l'appareil de sommeil
- Le tuyau de l'appareil de sommeil est toujours branché à l'appareil de sommeil et au masque
- SoClean est allumé
- Le filtre est installé



SoClean Inc.

12 Vose Farm Road | Peterborough, NH 03458

US: 1-866-501-3705 | CA: 1-800-916-4577

SoClean.com/patents

Issue Date: 06/2022 | Date de publication : 06/2022