




ADAPTER FOR HOSE AND MASK MAINTENANCE

Compatible With Most PAP Hoses

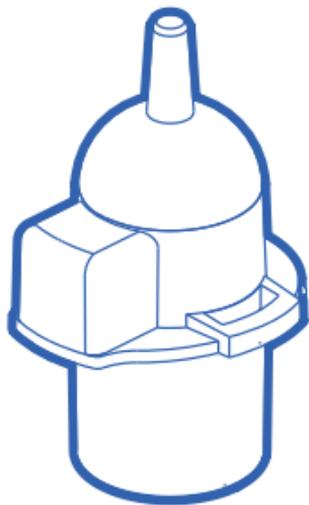

INSTRUCTIONS FOR USE
PNA1604-CA



If you need help connecting your adapter, contact SoClean.


For SoClean operation information, please see the User Manual provided with the device.

An electronic version of the User Manual is available at SoClean.com or you may contact Customer Care.


IMPORTANT: This adapter needs to fit snugly. If the fit appears too tight, do not force adapter into tubing. If the adapter is loose, call Customer Care.

US: 1-866-501-3705 | **CA:** 1-800-916-4577
SoClean.com | info@soclean.com


Installation Instructions

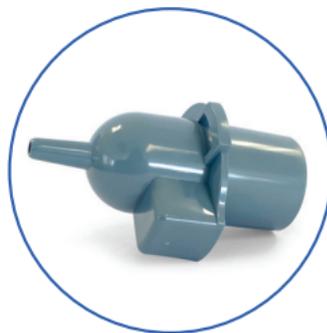


SoClean Adapter

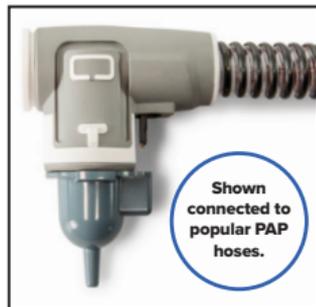


Detach the **Ozone Tube** from the **Check Valve** or your previous **SoClean Adapter**.

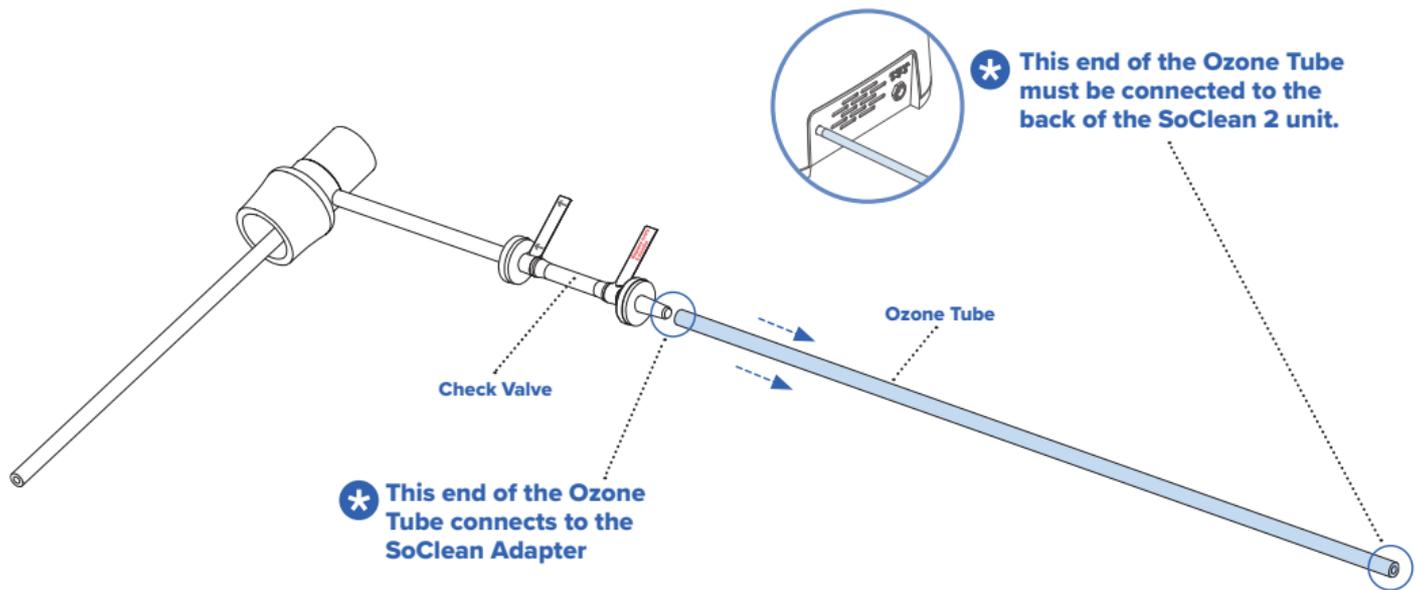

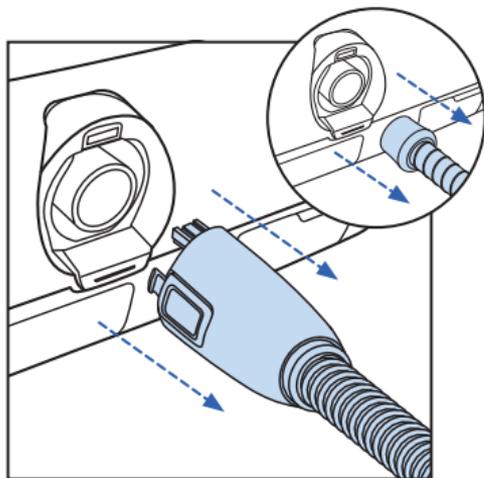


1

Remove the hose from your PAP device.

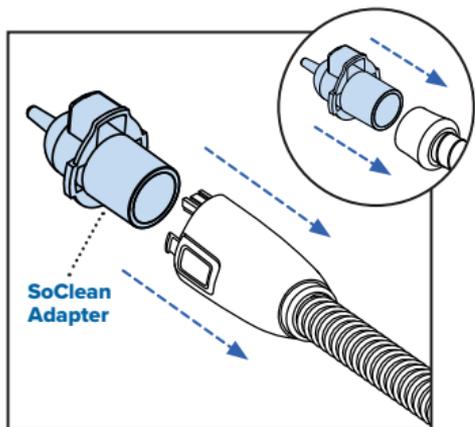

2

Install the **SoClean Adapter** onto the hose.

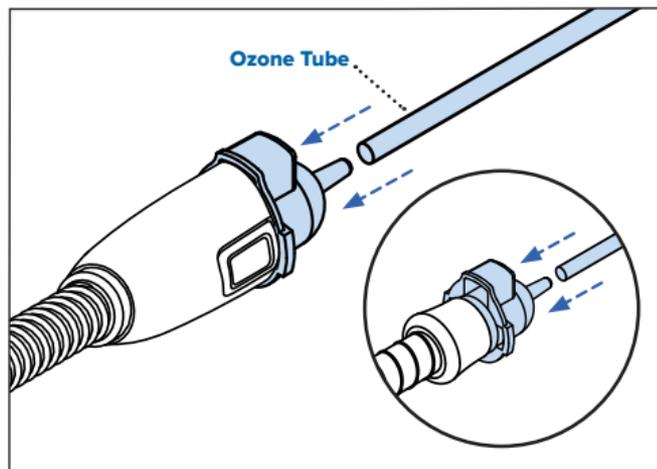

3

Connect **Ozone Tube** to the **SoClean Adapter**. You are now ready to use your SoClean.

Place mask into the **SoClean Chamber** and run the maintenance cycle.



WARNING: The **Ozone Tube** must always be connected to the **SoClean Adapter** and the back of the SoClean unit when operating the SoClean.

Once you have completed the setup steps, you are ready to begin the daily maintenance of your PAP hose and mask with your SoClean.

Safety Checklist Before Using Your SoClean

- PAP hose and mask are washed in sink and dried before first use
- SoClean Adapter is installed on PAP hose
- Ozone Tube is connected to the back of the SoClean unit and the SoClean Adapter
- PAP hose is still connected to the mask
- SoClean is powered on
- Filter is installed


Using Your SoClean

The below image shows your SoClean 2 connected.




Reconnecting Your Sleep Equipment

Once the **Maintenance Cycle** is complete, wait a minimum of 8 hours from the start of the Maintenance Cycle and use of the PAP mask and hose.

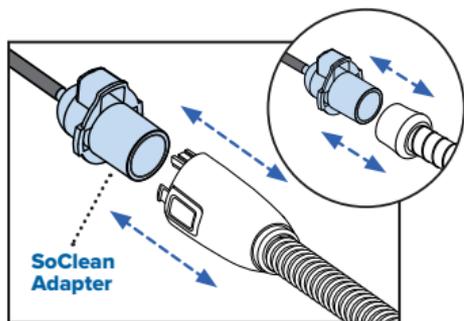

1

Remove the **SoClean Adapter** from your hose.

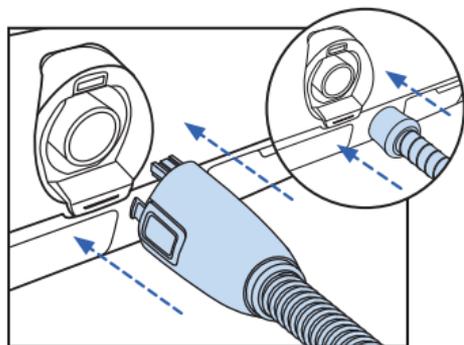

2

Reconnect your hose to the PAP device hose port.




FRANÇAIS

SoClean®

ADAPTATEUR POUR L'ENTRETIEN DU TUYAU ET DU MASQUE

Compatible avec la plupart des tuyaux PPC

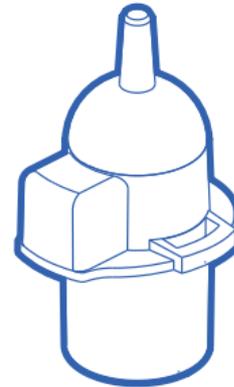

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
PNA1604-CA



Si vous avez besoin d'aide pour connecter votre adaptateur, communiquez avec SoClean.


Pour obtenir des renseignements sur le fonctionnement de SoClean, veuillez consulter le guide d'utilisation fourni avec l'appareil.

Vous pouvez aussi consulter une version électronique du guide d'utilisation sur SoClean.com ou contacter le service à la clientèle.

IMPORTANT : L'adaptateur doit être parfaitement ajusté. Si l'ajustement semble trop serré, ne forcez pas l'adaptateur dans le tube. Si l'adaptateur ne semble pas assez serré, communiquez avec le service à la clientèle.

É.-U. : 1 866 501-3705 | CA : 1 800 916-4577
SoClean.com | info@soclean.com

Instructions d'installation

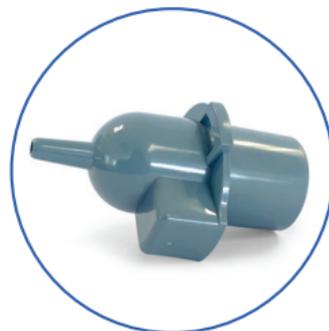



Adaptateur SoClean



Images de l'adaptateur connecté aux tuyaux PPC les plus courants.


Détachez le **tube d'ozone** du **clapet anti-retour**
ou de l'ancien **adaptateur SoClean**.

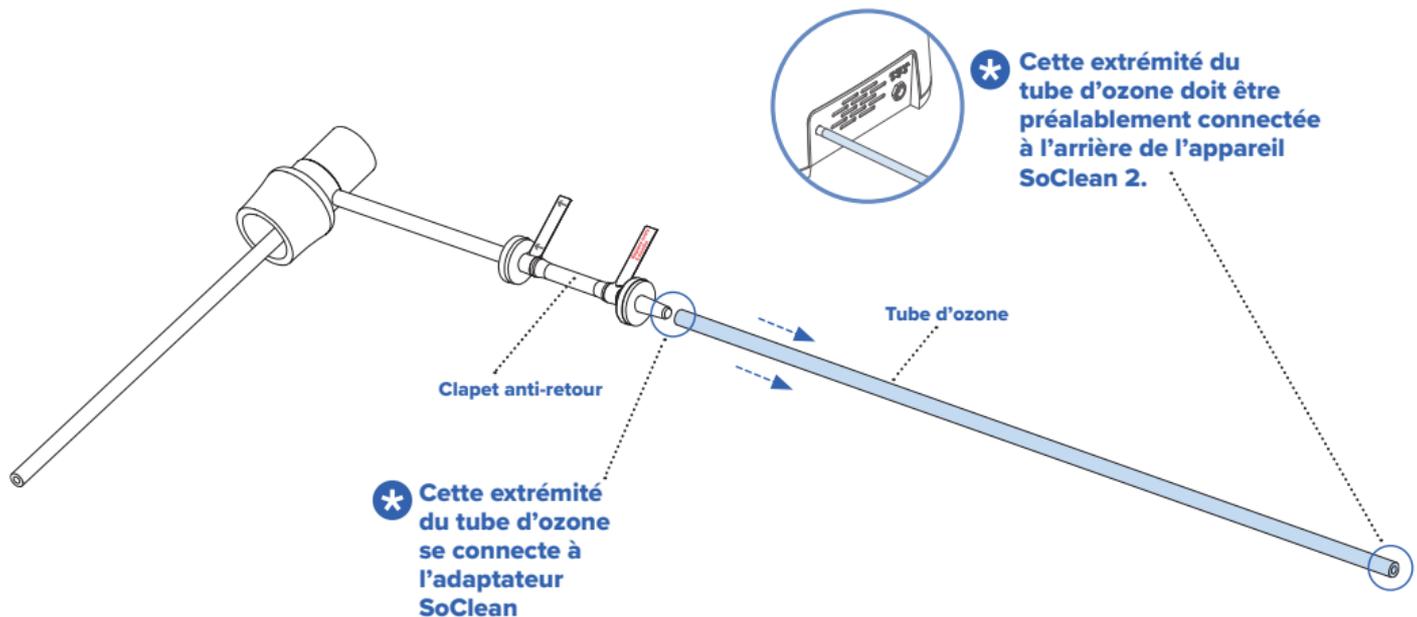

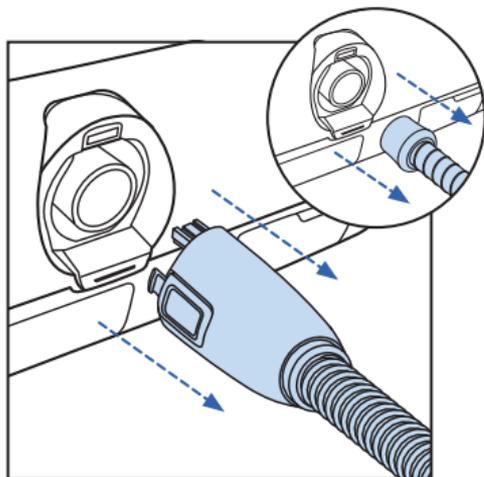


1

Retirez le tuyau de votre appareil PPC.

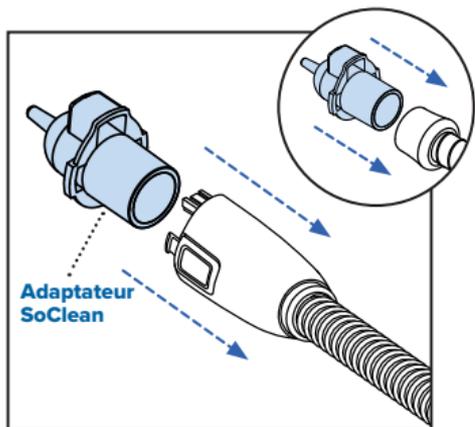

2

Installez l'**adaptateur SoClean** sur le tuyau.

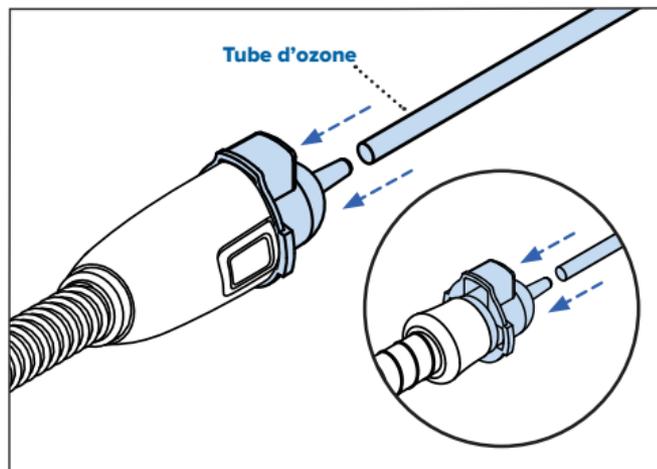

3

Branchez le **tube d'ozone** à l'**adaptateur SoClean**. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre SoClean.

Placer le masque dans **la chambre SoClean** et exécuter le cycle d'entretien.



AVERTISSEMENT : Le **tube d'ozone** doit toujours être connecté à l'**adaptateur SoClean** et à l'arrière de l'appareil SoClean lors de son utilisation.

Une fois que vous avez terminé les étapes de configuration, vous êtes prêt à commencer l'entretien quotidien de votre tuyau et de votre masque PPC avec votre appareil SoClean.

Liste de vérification de sécurité à faire avant d'utiliser votre SoClean

- Le tuyau et le masque PPC ont été lavés dans un évier et séchés avant la première utilisation
- L'adaptateur SoClean est installé sur le tuyau PPC
- Le tube d'ozone est raccordé à l'arrière de l'appareil SoClean et à l'adaptateur SoClean
- Le tuyau PPC est encore connecté au masque
- Le SoClean est allumé
- Le filtre est installé


Utiliser l'appareil SoClean

L'image ci-dessous montre votre appareil SoClean 2 branché.




Reconnecter votre équipement d'aide au sommeil

Une fois le **cycle de maintenance** terminé, attendez au moins 8 heures après le début du cycle de maintenance et avant l'utilisation du tuyau et du masque PPC.

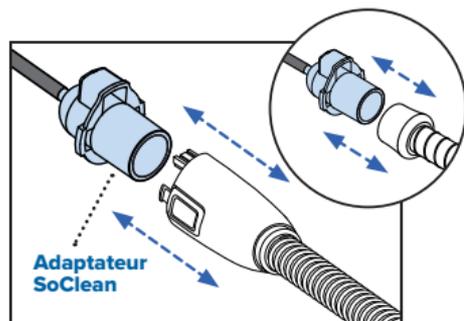

1

Retirez l'**adaptateur SoClean** de votre tuyau.

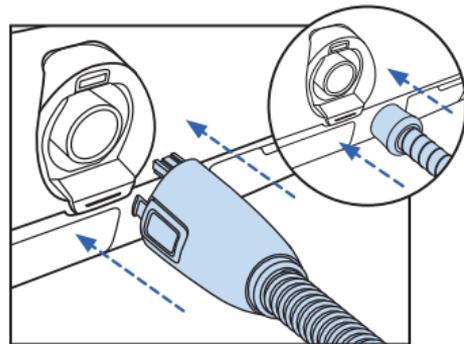

2

Branchez à nouveau le tuyau au port de l'appareil PPC.





SoClean Inc.

**1 Vose Farm Road | Peterborough, NH 03458
US/É.-U. : 1-866-501-3705 | CA : 1-800-916-4577**

SoClean.com/patents