

SoClean®

Neutralizing Pre-Wash
Détergent de pré lavage neutralisant



INSTRUCTIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

ENGLISH

Use the Neutralizing Pre-Wash to hand wash your sleep equipment accessories in the sink in order to remove residue, like oil from your skin, that can naturally build up over time.

The Neutralizing Pre-Wash is a mild, fragrance-free, hypoallergenic washing detergent and may be used for periodic cleaning as recommended by the sleep equipment manufacturer.

Pre-wash sleep equipment

Disconnect your mask, hose and reservoir from your sleep equipment. Before you disconnect your sleep equipment to wash, look at where your breathing hose is connected. You will reconnect either the breathing hose or the injection fitting to the same location, depending on your SoClean device and set-up instructions.



CUSTOMER CARE
US 866-501-3705 CA 800-916-4577



4 liters (1 gallon)

1


Mix one capful of the Neutralizing Pre-Wash with four liters (1 gallon) of water in a suitable clean container.

2

Wash your mask, hose and reservoir according to manufacturer instructions.

3

Rinse thoroughly with clean water and let dry.

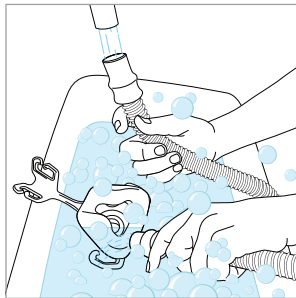

If you have a reservoir, reinsert the reservoir into the sleep equipment. Before reattaching the breathing hose, see the set-up instructions in the SoClean device user manual. If your sleep equipment requires an adapter, see adapter instructions for set-up.

WARNING: Do not put Neutralizing Pre-Wash or water into the SoClean Chamber. Do not use the Neutralizing Pre-Wash on or in the SoClean 3 device. The Pre-Wash is intended for washing sleep equipment accessories only.

CAUTION: Use the Neutralizing Pre-Wash or unscented mild detergent to wash your sleep equipment accessories according to the sleep equipment manufacturer's recommended method and interval. Use the SoClean 3 for daily supplemental maintenance of your sleep equipment accessories.



FRANÇAIS

Utilisez le détergent de prélavage neutralisant pour laver à la main les accessoires de votre équipement de sommeil dans l'évier. Cette mesure permettra d'éliminer les résidus (p. ex. l'huile de votre peau) qui peuvent s'accumuler naturellement avec le temps.

Le détergent de prélavage neutralisant est un détergent de lavage hypoallergénique, doux et sans parfum. Il peut être utilisé pour le nettoyage périodique recommandé par le fabricant de l'équipement de sommeil.

Prélavage de l'équipement de sommeil

Déconnectez le masque, le tuyau et le réservoir de votre équipement de sommeil. Avant de débrancher votre équipement de sommeil pour le laver, regardez à quel endroit votre tuyau de respiration est connecté. Vous reconnecterez le tuyau de respiration ou le raccordement d'injection au même endroit, selon votre appareil SoClean et les instructions de configuration de ce produit.



SERVICE À LA CLIENTÈLE
É.-U. 866-501-3705 CA 800-916-4577




4 litres (1 gallon)

1 Mélanger un bouchon de détergent de pré lavage neutralisant avec quatre litres (1 gallon) d'eau dans un contenant propre adéquat.

2 Laver le masque, le tuyau et le réservoir conformément aux instructions du fabricant.

3 Rincer abondamment à l'eau claire et laisser sécher.

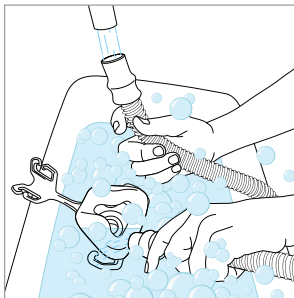

Réinsérer le réservoir (s'il y en a un) dans l'équipement de sommeil. Avant de reconnecter le tuyau de respiration, consulter les instructions de configuration dans le manuel de l'utilisateur de l'appareil SoClean. Si l'équipement de sommeil nécessite un adaptateur, consulter les instructions de l'adaptateur pour la configuration.



AVERTISSEMENT : Ne pas verser d'eau ni de détergent de pré lavage neutralisant dans la chambre SoClean. Ne pas utiliser le détergent de pré lavage neutralisant sur ou dans l'appareil SoClean 3. Le pré lavage est destiné uniquement au lavage des accessoires de l'équipement de sommeil.



MISE EN GARDE : Utiliser le détergent de pré lavage neutralisant ou un détergent doux non parfumé pour laver les accessoires d'équipement de sommeil, conformément à la méthode et à l'intervalle recommandés par le fabricant de cet équipement. Utiliser l'appareil SoClean 3 pour l'entretien quotidien supplémentaire des accessoires d'équipement de sommeil.





SoClean, Inc.
1 Vose Farm Road | Peterborough, NH 03458 USA
SoClean.com | info@SoClean.com

Issue Date/Date d'émission : 10/2023

C000504 Rev C